

診療用  
For dental  
treatment

# スーパーバイオフィルタ

サクションブロワの排気を浄化する — Super Bio Filter

汚れた排気が診療室に  
戻っていませんか？


99.97%  
の粉塵を捕集  
(0.3 $\mu$ mまで)

「サクションブロワの排気が機械室内に放出され、  
そこにはコンプレッサーも同居」  
そんなことになってませんか？

患者さんや先生、スタッフのみなさんの  
健康を守るためにも  
「スーパーバイオフィルタ」を  
ぜひご使用下さい。



TCV-Xへの設置例

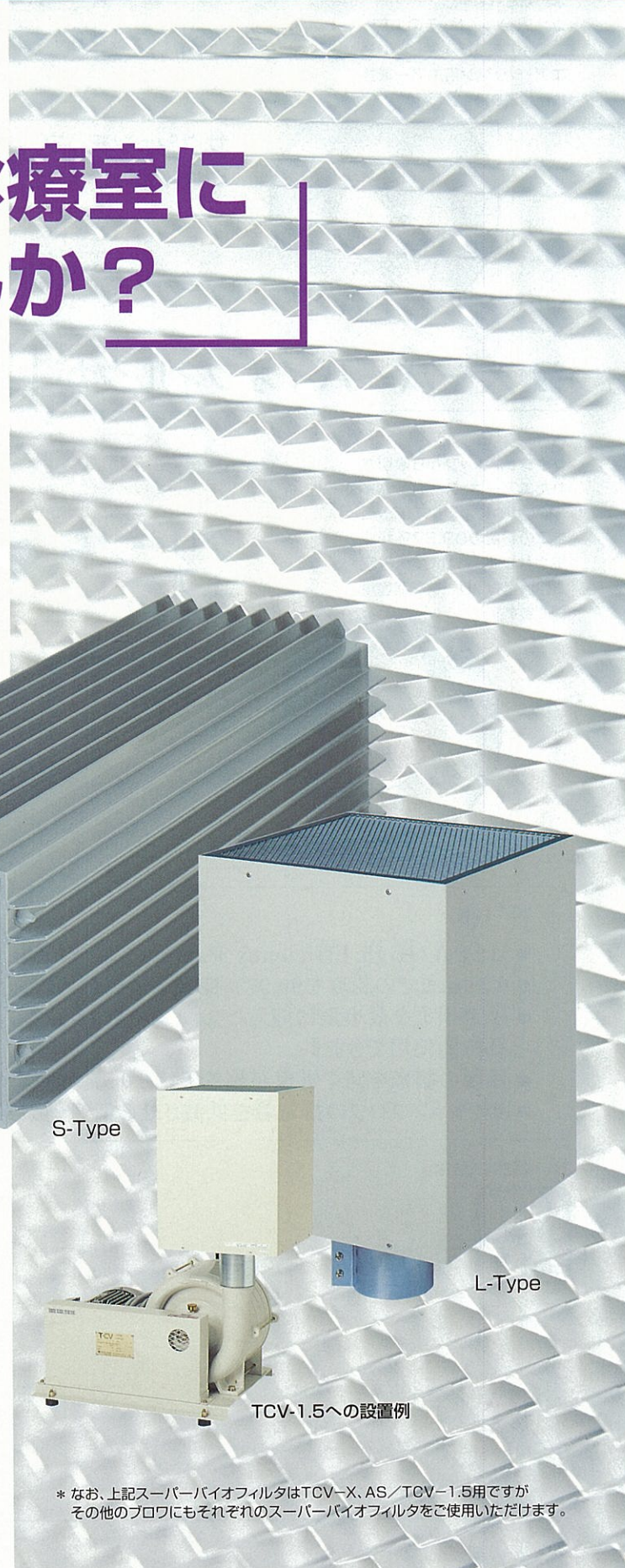

S-Type

L-Type

TCV-1.5への設置例


歯科用セントラル・サクション・システムの専門メーカー

株式会社 東京技研

\* なお、上記スーパーバイオフィルタはTCV-X、AS/TCV-1.5用ですが  
その他のブロワにもそれぞれのスーパーバイオフィルタをご使用いただけます。


## ■ スーパーバイオフィルタが「設置されていない」医院の例

サクシオンチップから吸引されたエアが機械室でそのまま排気されます。コンプレッサーは、そのエアを吸引してエア・タービンやエア・シリンジ用エアを診療室に送ります。

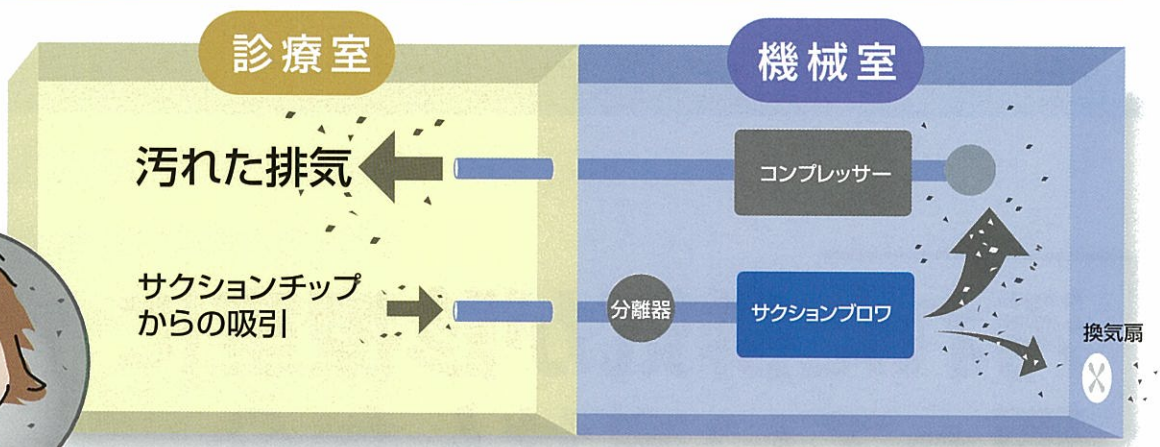

## ■ スーパーバイオフィルタが「設置されている」医院の例

サクシオンチップから吸引されたエアは、スーパーバイオフィルタによって、 $0.3\mu\text{m}$ までの粉塵の99.97%が捕集されます。これで、機械室も診療室もクリーンな環境が保てます。

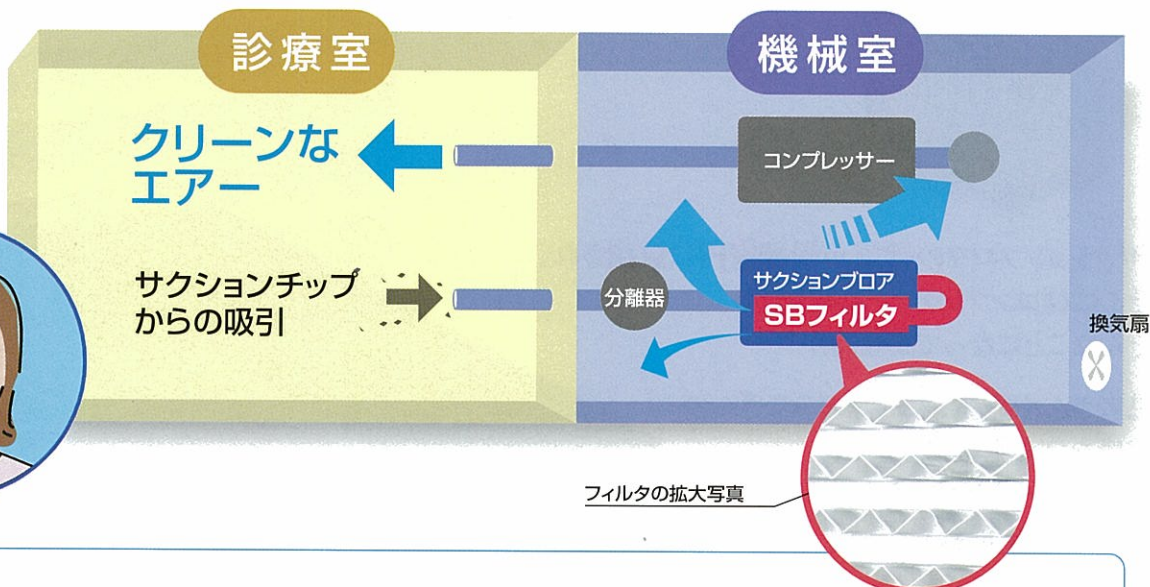

### 特徴

- HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) 規格の特殊バイオフィルタ。
- $0.3\mu\text{m}$ までの粉塵を99.97%捕集する抜群の性能を誇ります。
- 圧力損失を最小限に抑えたフィルタのため、サクシオンブロウの吸引性能に影響を及ぼすことなく長時間使用できます。
- 雑菌の繁殖を防ぐ処理が施されており、異臭の発生を抑えます。
- サクシオンブロウの排気音を低減させる消音効果があるため、騒音の発生を軽減します。

お問い合わせは



歯科用セントラル・サクシオン・システムの専門メーカー

**株式会社 東京技研**

Home Page <http://www.tokyogiken.com>  
E-mail [k-watana@tke.att.ne.jp](mailto:k-watana@tke.att.ne.jp)

本社 〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1-25-13  
TEL(03)3703-5581(代) FAX(03)3705-1760  
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央4-28-2  
TEL(022)371-9651(代) FAX(022)371-9653  
名古屋営業所 〒465-0005 名古屋市名東区香流1-822  
TEL(052)776-3355(代) FAX(052)776-3356  
大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-8-1  
TEL(06)6368-8877(代) FAX(06)6368-8876  
福岡営業所 〒812-0066 福岡市東区二又瀬21-18  
TEL(092)612-1191(代) FAX(092)612-1193